



Volk®使い捨て接触・レーザーおよび診断用レンズ(直像接触)

- 滅菌。酸化エチレンガスで滅菌。
- 使い捨て専用。
- パッケージが開いていたり、損傷していたりした場合は、使用しないでください。
- 連邦法(米国)では、この機器の販売または注文は医師にのみ制限しています。

日本語:取扱説明書

取扱説明書

Volk®使い捨て接触・レーザーおよび診断用レンズ(直像接触)は、眼底検査のための診断用レンズとして、および眼球内の異常の治療のために使用されます。

仕様

製品	倍率	レーザースポット倍率 因数	適用可能な接触設 計	レーザー反射防止コー ティング
Volk(ボルク)切妻術 用	1.57	0.63	標準流体	BBAR
Volk(ボルク)虹彩切 開術用	1.70	0.58	標準流体	BBAR



警告

1. 使用する前に、機器を汚染切除製品に浸さないでください。
2. 接触面を点検して、いかなる破損(破片や引っかき傷など)も無いことを確認してください。機器が損傷している場合、使用または修理しないでください。



予防措置

1. これらの取扱説明書を最後まで読んで完全に理解するまでは Volk®使い捨て接触レーザーおよび診断用レンズを(直像接触)ご使用にならないでください。
2. 他の直像眼科用接触・レーザー治療および診断用レンズと一貫した方法で免許を受けた医師によって使用されるためのレンズです。
3. 滅菌包装とレンズは、ご使用前に点検する必要があります。
4. Volk®使い捨て接触・レーザーおよび診断用レンズ(直像接触)は 1 人の患者の使い捨て使用のためのレンズです。
5. 再滅菌または再使用しないでください。
6. 本機器は使い捨て用に包装され、滅菌されています。再使用、再処理、または再滅菌しないでください。再使用、再処理、または再滅菌すると汚染のリスクを引き起こしたり、ある患者から別の患者への感染症の伝染を含め、患者の感染または交差感染の原因となります。機器の汚染は患者の負傷、病気、または死を引き起こすことがあります。

「使用」期限

機器は、包装のラベルの「使用」期限までにご使用ください。

推奨される使用法

1. 包装からレンズを取り出し、滅菌作業エリアに置きます。
2. 標準的な流体の接触式レンズは、メチルセルロースまたは同様の界面溶液をくぼんだ接触面(つまり、角膜と機器の間)に塗布する必要があります。
3. Volk(ボルク)の BBAR レーザー反射防止コーティングは、可視光線レーザー、および近赤外線波長レーザー処置(アルゴン、ダイオードなど)と同時に、画像診断にも最適です。
4. 治療部位でのスポットサイズを計算する場合には、レーザースポットの設定は適切なレーザー倍率ファクタを掛けてください。使用するレンズに適切なレーザー倍率因数を見つけるには、仕様表を参照してください。



酸化エチレンを使用して滅菌済み



再使用しないでください



重要な注意情報については、取扱説明書を参照してください



梱包が損傷していたり開いている場合、使用しないでください



使用期限



ロット番号



参照番号



メーカー


IM-086 改訂 E



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA
電話番号: 440-942-6161
ファックス番号: 440-942-2257
Email: volk@volk.com

EC REP

EU 代理店:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, ドイツ
メール: info@riester.de
電話: +49 74 77 / 92 70-0
ファックス: +49 74 77 / 92 70-70

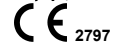

EC REP

欧州共同体の正式代表者

Toll Free: 800-345-8655 (USA) Telephone: 440-942-6161 Fax: 440-942-2257 Email: volk@volk.com